

フリー

リハビリパンツ™ スーパー

スルツとはけてピタツとフィットし
長時間モレずに安心です。




*アンモニア・硫化水素・ジメチルアミンについての消臭効果があります

スーパー吸収体

尿をたっぷり吸収するのでモレを防いで安心です。
パッドだけで尿を取りきれないことが多い方に最適です。


背モレブロック構造

紙パンツ単体使用時の多量な尿・便を
せき止めます。

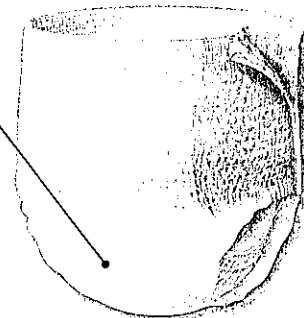

●リハビリパンツ™ スーパー

	適応サイズ(ウエスト)	ウエストゴムカラー
Sサイズ	50~70cm	白 <input type="checkbox"/>
Mサイズ	60~85cm	
Lサイズ	75~105cm	
LLサイズ	90~125cm	

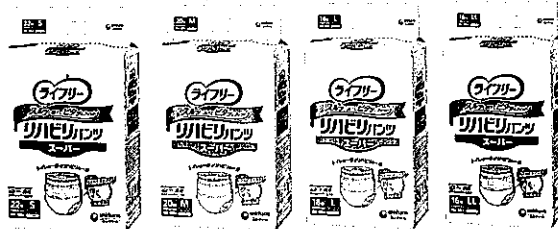

尿とりパッドなしでも長時間安心パンツ

認知症高齢者の方などの長時間
パンツ単体使用に最適です。



*アンモニア・硫化水素・ジメチルアミンについての消臭効果があります

ウエストのカラーアシスト



ウエストのゴムが背中側は白、お腹側は青で
前後がわかりやすく、認知機能が低下した方の
パンツの着用を手助けします。

1000ccスーパーロング吸収体

尿とりパッドがなくても長時間モレを防ぎ、安心です。
認知機能の低下でパッドを取ってしまう方や、トイレ誘導を拒否
される方などに最適です。

背モレブロック構造

紙パンツ単体使用時の多量な尿・便を
せき止めます。

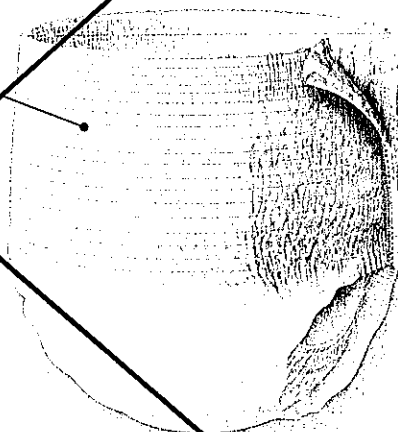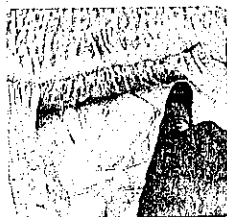

	適応サイズ(ウエスト)	ウエストゴムカラー
Mサイズ	60~85cm	青 <input type="checkbox"/>
Lサイズ	75~105cm	



※パッケージは変更になる場合があります。



ライフリー

横モレ安心テープ止め

ライフリー史上最高の便モレブロック率を実現!
尿だけでなく泥状便や水様便*が出てもモレ安心!



*プリストルスケール6・7相当


*アンモニアについての消臭効果がみられます。

着眼

便モレが発生している約8割が「足ぐり」からのモレ

便の収容量の限界をオーバー!


パッドでは受け止めきれず、
テープ止めの外に溢れ出る!

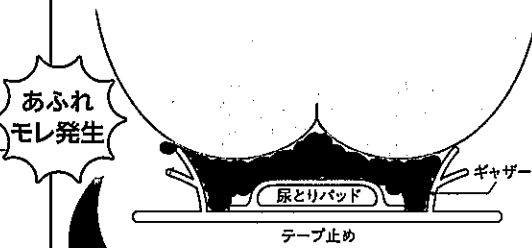

あふれ
モレ発生

ギャザー倒れでスキマが発生!

おむつ装着時、臀部でギャザーを押しつぶし
ギャザー倒れに!

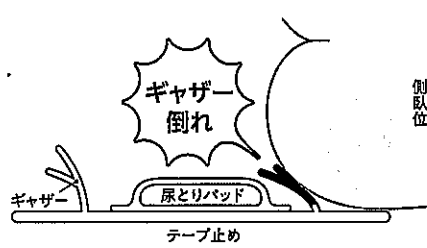


ギャザー
倒れ

側臥位

特許技術

足ぐり軟便キャッチポケット

軟便の収容する空間を2倍*に拡大。
*当社製品比

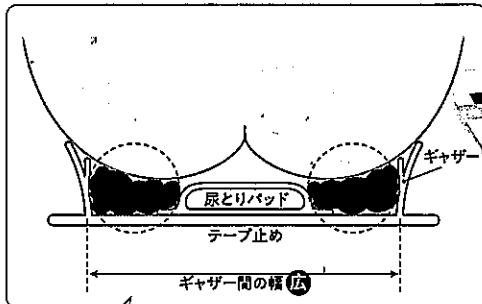

ギャザー間の幅(広)


軟便キャッチポケットで
便をためている動画はこちら!



特許技術

3重ぴったりフィットギャザー

ギャザーがおしりにつがされず
ぴったりフィット。
スキマモレ低減。

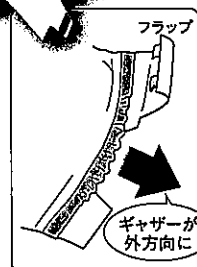

フラップ

ギャザーが
外方向に


背中軟便キャッチポケット & 背モレ防止ギャザー



3重ぴったりフィットギャザーで
ギャザー倒れせず立ち上がる
動画はこちら!



	適応サイズ(ヒップ)	バックシートカラー
Sサイズ	56~80cm	橙
Mサイズ	67~106cm	青
Lサイズ	81~128cm	緑
XLサイズ	81~141cm	紫

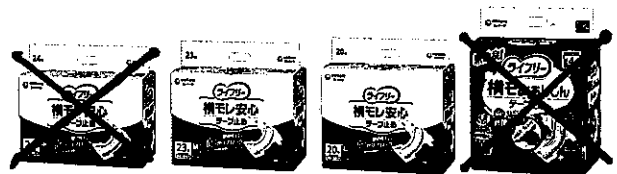

使用者の声

- 泥状便の時でもギャザー部分からモレることなく、止まっていた。
- 今までズボンまで便汚染していたが、減ってきた。
- ギャザーが立ち上がりやすいので、現行品よりも尿モレの回数が減った。

※対象製品との比較 介護者調査 ユニ・チャーム調べ

※動画視聴にはパケット通信料がかかります。※iPhone/iPadおよびAndroidスマートフォンからの視聴を推奨いたします。端末によっては、QRコード読み取りおよび動画再生ができない場合があります。※本動画は、端末へのダウンロード保存はできません。※本動画は予告なく終了する場合があります。


リフレ
簡単テープ止めタイプ
横モレ防止




「横モレ防止空間」で尿・軟便をしっかり受け止める!

尿・軟便モレブロック!
横モレ防止空間

独自の吸収体形状で「横モレ防止空間」を形成し、尿や軟便があふれ出るのを防ぐ!

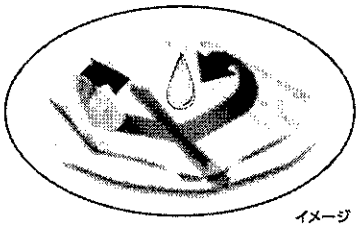

イメージ (パッド併用時)

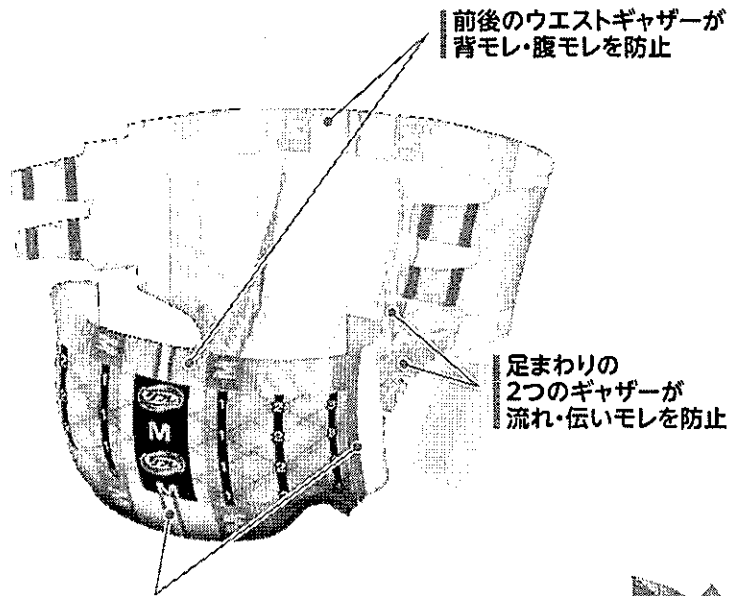

●お客様の声




外モレが減少したため、寝衣やシーツ交換がなくなり時間短縮になった。

ギャザーが立ち上がりやすくなったのでパッドが入れやすい。


立体ギャザーがソケイ部にあてやすく、フィット感も良かった。

※個人の感想です。

長くて使いやすい「クロスフィット」テープ

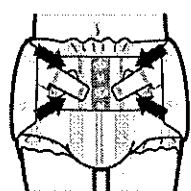

チェックの柄にあわせてテープをX(クロス)状に止めることで
しっかりフィット
はずれにくい

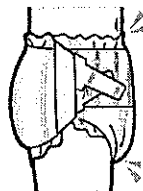

ウエストピッタリ!
股下フィット!
すきまをつくらず
モレにくい

●ラインナップ

サイズ	SS	S	M	L	大きめL
ヒップ	50~85cm	57~92cm	77~110cm	92~130cm	92~142cm
バックシートデザイン					
吸収回数	おしっこ 4回分	おしっこ 3回分	おしっこ 4回分	おしっこ 5回分	

体の大きい方にもピッタリ!



大きめL

一晩中安心さらさらパッド (スーパー/ウルトラ/エクストラ)

朝までモレずに、肌もさらさら。
夜間の良眠をサポートします。




*アンモニアについての消臭効果がみられます。

特許技術

なみなみシート®

革新1 驚きのスピード吸収でモレ安心

不純物が混じった尿でも目詰まりせず、3倍^{*2}のスピード吸収

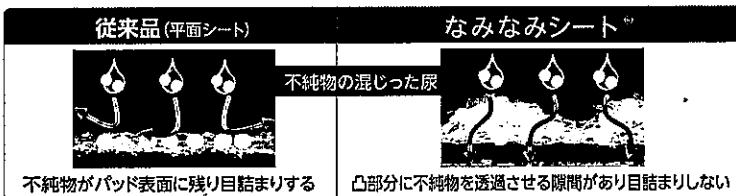

世界初の
特許技術

「なみなみシート」で
3つの革新



※動画視聴にはパケット通信料がかかります。
※iPhone・iPadおよびAndroidスマートフォンからの視聴を推奨いたします。端末によっては、QRコード読み取りおよび動画再生ができない場合があります。
※本動画は、端末へのダウンロード保存はできません。
※本動画は予告なく終了する場合がありますまたは内容が変更になる場合があります。

革新2 シルクのような肌ざわり

ベビー用紙おむつと同じ素材で、肌との摩擦を20%低減^{*2}

特許技術

さらさらドライシート


革新3 ライフリー史上、最高級のドライ性

なみなみシート®とのWの効果で肌につく尿を2分の1にカット^{*2}

特許技術

引き込み吸収ライン


体圧がかかった状態でも尿を素早く吸収

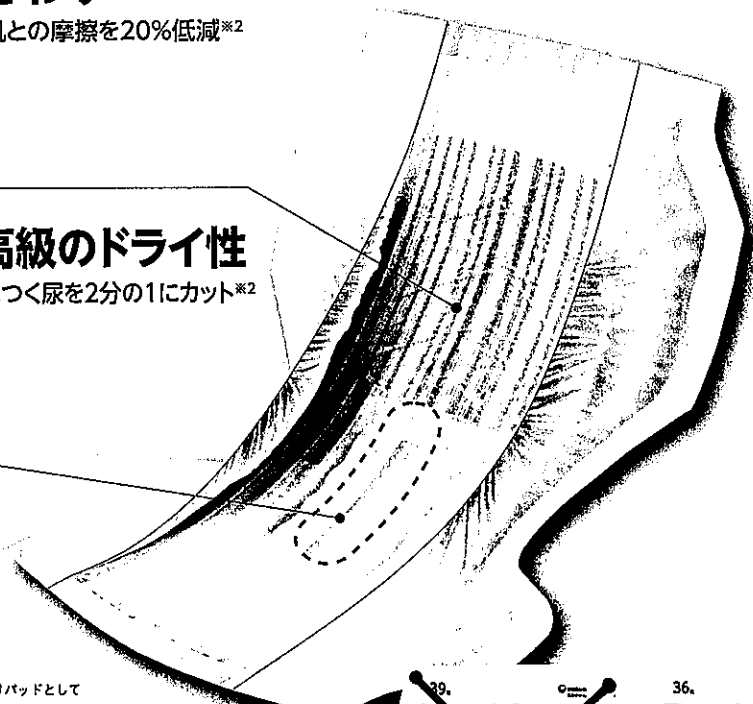

※1 湿潤時にも高吸水性を維持できる凹凸シートをトップシートに採用した大人用尿とりパッドとして
ユニ・チャーム調べ 2015年2月時点 主要グローバルブランド製品において

※2 当社従来品比

	サイズ(巾×長さ)	バックシートカラー
スーパー	28×60cm	紺藍
ウルトラ	28×60cm	紫
エクストラ	28×60cm	青

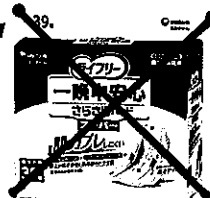

製品使用後の評価

94%^{*1}の方が「従来品よりサラッとしている」を実感!

使用者の声

- 吸収後のパッドの表面の、さらさら感が従来品と明らかに違う。
- 12時間使用したが、尿量が多い方も、モレはなかった。
- 肌ざわりがとても良く、表面がサラッとしている。



※対象製品との比較 介護者調査 ユニ・チャーム調べ

ライクリー

長時間安心さらさらパッド



座った姿勢でもスピード吸収し、肌をさらさらに保ちます。


特許技術

引き込み吸収ライン

体圧がかかった状態でも尿を素早く吸収し、表面のベタつきを防ぎます。

後ろも前も包み込む安心のワイド形状

おしりまですっぽり包み込むので、後ろからのモレを防ぎます。

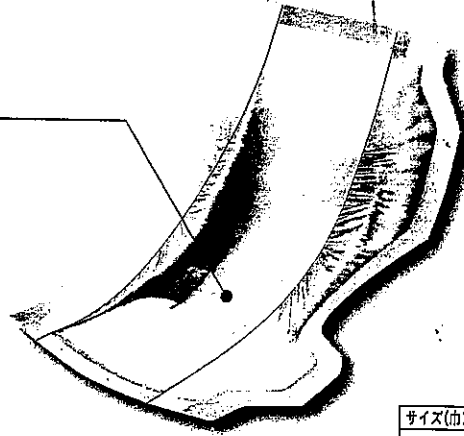

サイズ(巾×長さ)	バックシートカラー
28×55cm	黄緑

ライクリー

パワーガード(ウルトラ/エクストラ)



一晩中の尿をしっかり吸収し、モレを徹底ガードします。

*アジノモニアについての消臭効果がみられます。

ウルトラ立体ギャザー

高さ4cmのギャザーが股ぐりにしっかりフィットしてモレを防ぎます。



特許技術

簡単装着スリット

吸収体下層のスリットに沿ってパッドが股間にしっかりフィットします。

前後フリー形状

前後の区別がなくあてやすいです。

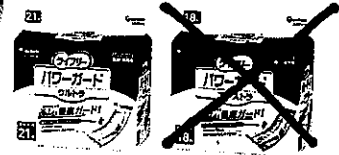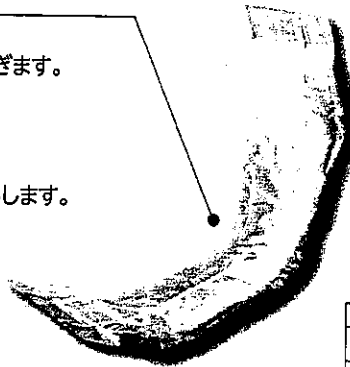

	サイズ(巾×長さ)	バックシートカラー
ウルトラ	22×60cm	緑
エクストラ	22×60cm	青

リフレ
ズレなく快適
紙パンツ用パッド




すっきり形状で動きやすい! 「くっつきテープ」でズレにくい!

「くっつきテープ」でズレ防止

お肌にやさしい

前後がはっきり

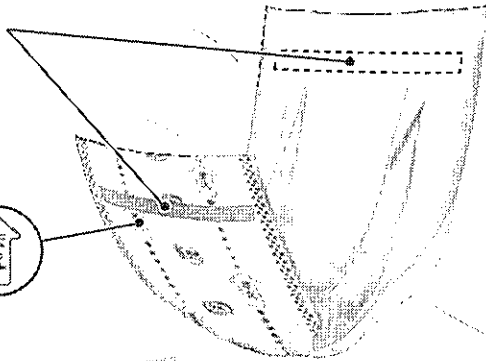

二つ折り形状
紙パンツに着けやすい。

股下すっきり形状



横モレを防ぐ




イメージ

おしっこ **2** 回分

消臭ポリマー配合
臭いにも安心

巾16cm
×
長さ46cm

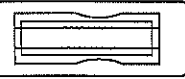

~~夜間にお使いの方はこちら!~~
~~寝ているときも安心!
寝返りしてもズレにくい!~~
~~おしっこ **4** 回分~~ ~~透湿タイプ~~
~~ズレなく快適~~

~~パンツ用
ぴったりパッド~~
~~はくパンツにも
下着にも使える!~~ ~~おしっこ **1** 回分~~
~~ぴったりパッド~~